

**REF 6001**

Poliravimo Padas

## Naudojimas pagal paskirtį

Poliravimo padas, skirtas naudoti su standžiaisiais endoskopais, turi poliravimo paviršių, padedantį sumažinti nešvarumus nuo lęšio.

## Įspėjimai

- Naudokite tik su standžiaisiais endoskopais.
- NENAUDOKITE ant labai įkaitusių paviršių.
- NENAUDOKITE su cheminėmis medžiagomis ar tirpikliais.
- NEMODIFIKUOKITE poliravimo padų.
- NELENKITE endoskopo poliravimo metu.

## Įvykus incidentui

Bet koks rimtas incidentas, susijęs su šiuo prietaisu, turi būti praneštas gamintojui ir atitinkamai valstybės narės institucijai, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas.

## Utilizavimas

Šalinti laikantis medicinos įstaigos ir savivaldybės nurodymų.



[Domicomed.com/eifu](http://Domicomed.com/eifu)





Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street,  
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,  
6312 Steinhausen, Switzerland



Domco Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430  
USA  
1.800.750.5300  
[www.domicomed.com](http://www.domicomed.com)

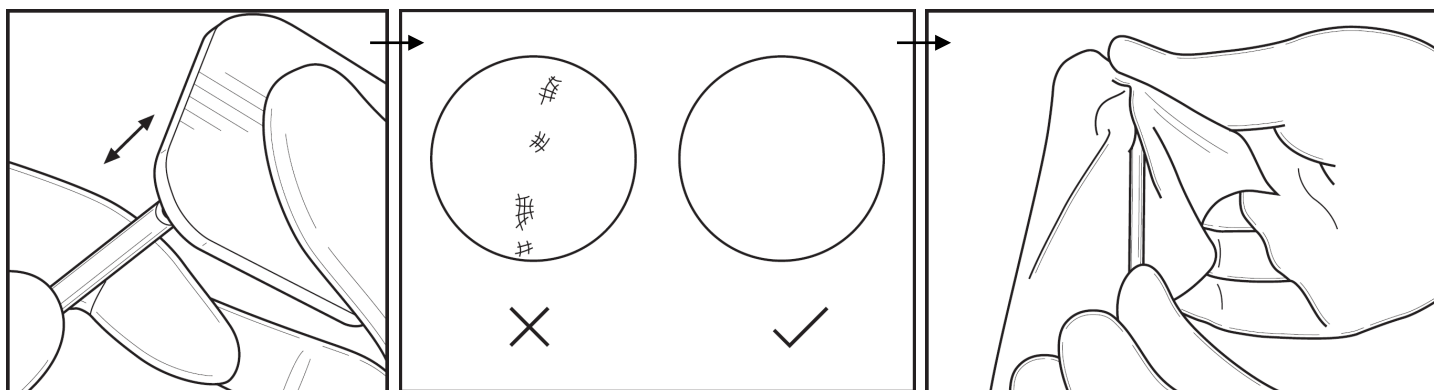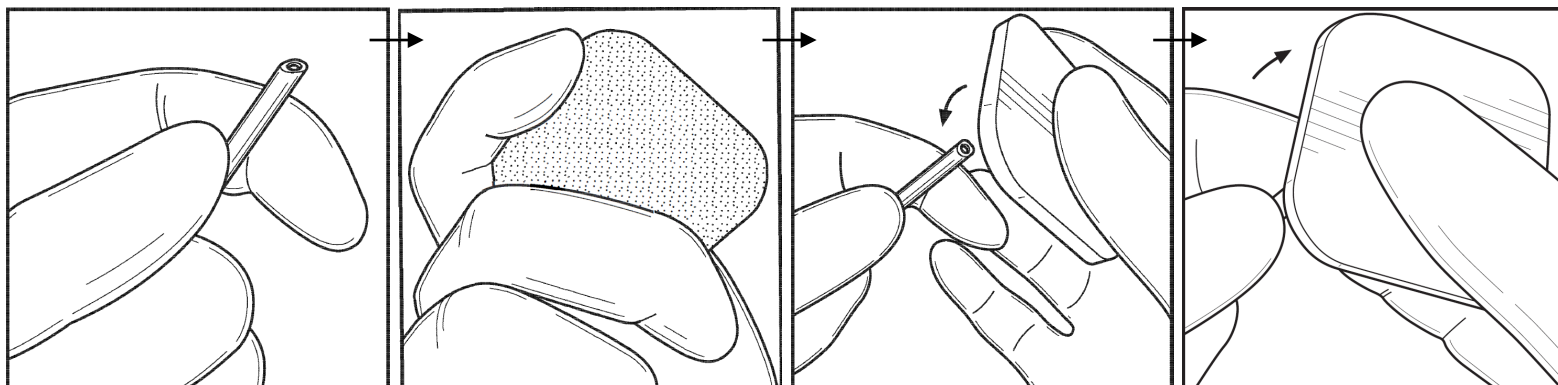

Pasirinktina

